


TBM



COSY CRIB

Rooming-in Bett für die Kleinsten

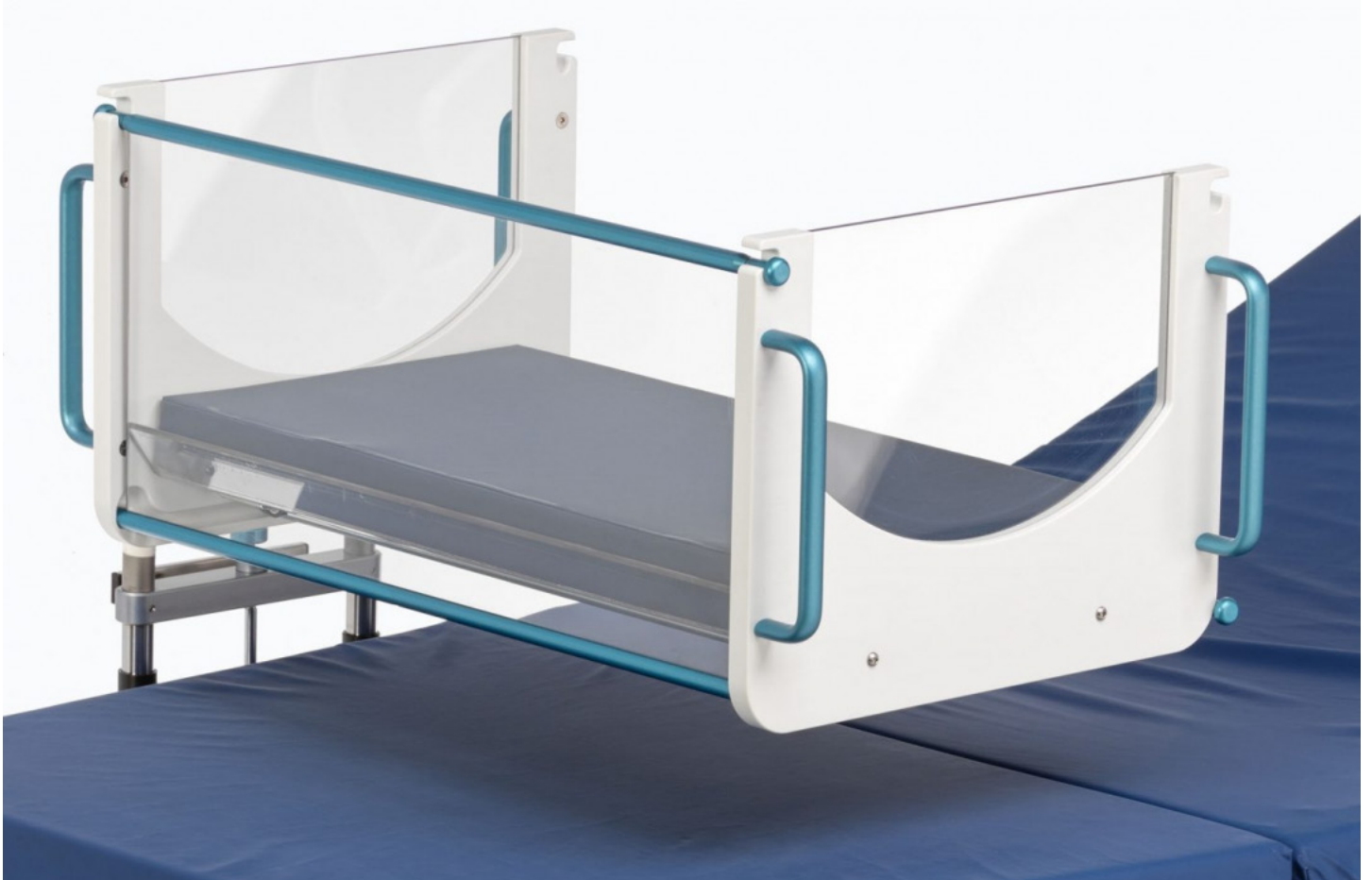

Quelle: studiorecup

“

Die ersten Tage nach der Geburt sind für die Bindung zwischen Mutter und Baby entscheidend.

Das Rooming-In Bettchen kann von beiden Seiten geöffnet und unmittelbar an das Mutterbett heran geschoben werden. So wird die körperliche Nähe intensiv geprägt und dem Baby wird Sicherheit und Ruhe geschenkt.



+ Flexibilität

Das Rooming-In Bettchen lässt sich an die Betthöhe anpassen und hat stets die Verbindung zur Liegefläche der Mutter.



+ Leichtgängig und komfortabel

Die Seitenteile können je nach Position beidseitig geöffnet werden, so dass die Verbindung zum Mutterbett gegeben ist



+ Höhenverstellung

Stufenlose, gasfederunterstützte Höhenverstellung über Fußpedal von 67,5 cm - 90 cm



+ Bedienbarkeit

Beidseits angebrachte Haltegriffe zur Steuerung des Bettchens. Zusätzlich angebaute Normschine für Zubehör




+ Bremssystem

4 schwenkbare Rollen mit zwei Feststellern



+ Hygiene

Sichere Reinigung durch glatte Oberflächen und klares Design

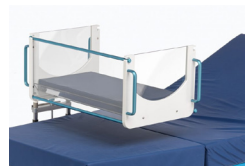

TBM Medizintechnik GmbH

Hegelstraße 1
72663 Großbettlingen

Telefon 07022 / 40560-0
Fax: 07022 / 40560-42

E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
Website: www.tbm-medizintechnik.de